

Τι περιλαμβάνει η συσκευασία

Για τη διεξαγωγή του τεστ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα υλικά που περιέχει η συσκευασία. Και συγκεκριμένα, μία μπατονέτα, ένα φιαλίδιο με υγρό και μία πλαστική δοκιμαστική ταινία (μοιάζει με τη δοκιμαστική ταινία του τεστ εγκυμοσύνης).

Η θερμοκρασία συντήρησης του τεστ είναι από -2 έως 30 βαθμούς Κελσίου και για το λόγο αυτό περιέχει έναν καταγραφέα, που υποδεικνύει εάν το προϊόν έχει τραβήξει υγρασία και δεν είναι κατάλληλο για χρήση.

Στη συσκευασία περιέχεται φυλλάδιο με οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και σχετικά εικονίδια. Ήταν άλλωστε στις προδιαγραφές που ετέθησαν από τον κράτος για την επιλογή της εταιρείας. Σύντομα θα δοθεί στη δημοσιότητα και επεξηγηματικό βίντεο.

Δείτε το περιεχόμενο της συσκευασίας:



Πώς γίνεται το self test στο σπίτι

Σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, το τεστ γίνεται από τη μύτη με τη χρήση μπατονέτας (ή στυλεού). Η ειδική μπατονέτα πρέπει να τοποθετείται και στα δύο ρουθούνια σε βάθος 2,5 εκατοστά, ώστε να συλλέγεται αρκετή ποσότητα και να υπάρχει επάρκεια δείγματος.

1. Περιστρέφουμε στο σημείο εκείνο 5 φορές την μπατονέτα, ώστε να συλλέξει τη βλένη. Ακολουθώντας επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και στο άλλο ρουθούνι. Για τη λήψη του υλικού ο στυλεός δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί σε πολύ μεγάλο βάθος, όπως συμβαίνει με τα rapid tests.
2. Στη συνέχεια τοποθετούμε τη μπατονέτα στο μπουκαλάκι με το υγρό και το σπρώχνουμε πάνω κάτω για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.


3. Αφαιρούμε την μπατονέτα προσεκτικά και ανακατεύουμε καλά το μπουκαλάκι με το υγρό.
4. Ακολούθως, ανοίγουμε συσκευασία αλουμινίου που περιέχει τη δοκιμαστική ταινία. Την τοποθετούμε σε μία επιφάνεια χωρίς κλίση και ρίχνουμε τρεις σταγόνες από το μπουκαλάκι με το υγρό στην ειδική οπή.

Δείτε όλη τη διαδικασία:



Το αποτέλεσμα φαίνεται στη δοκιμαστική ταινία, η οποία έχει δύο πεδία με τα γράμματα C και T που ερμηνεύουν τα αποτελέσματα. Μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα σε 15 με 20 λεπτά, όχι όμως αργότερα. Ακολούθως αποθέτουμε τη συσκευασία σε κάλαθο αχρήστων.

Δείτε όλες τις πιθανές ενδείξεις του αποτελέσματος:

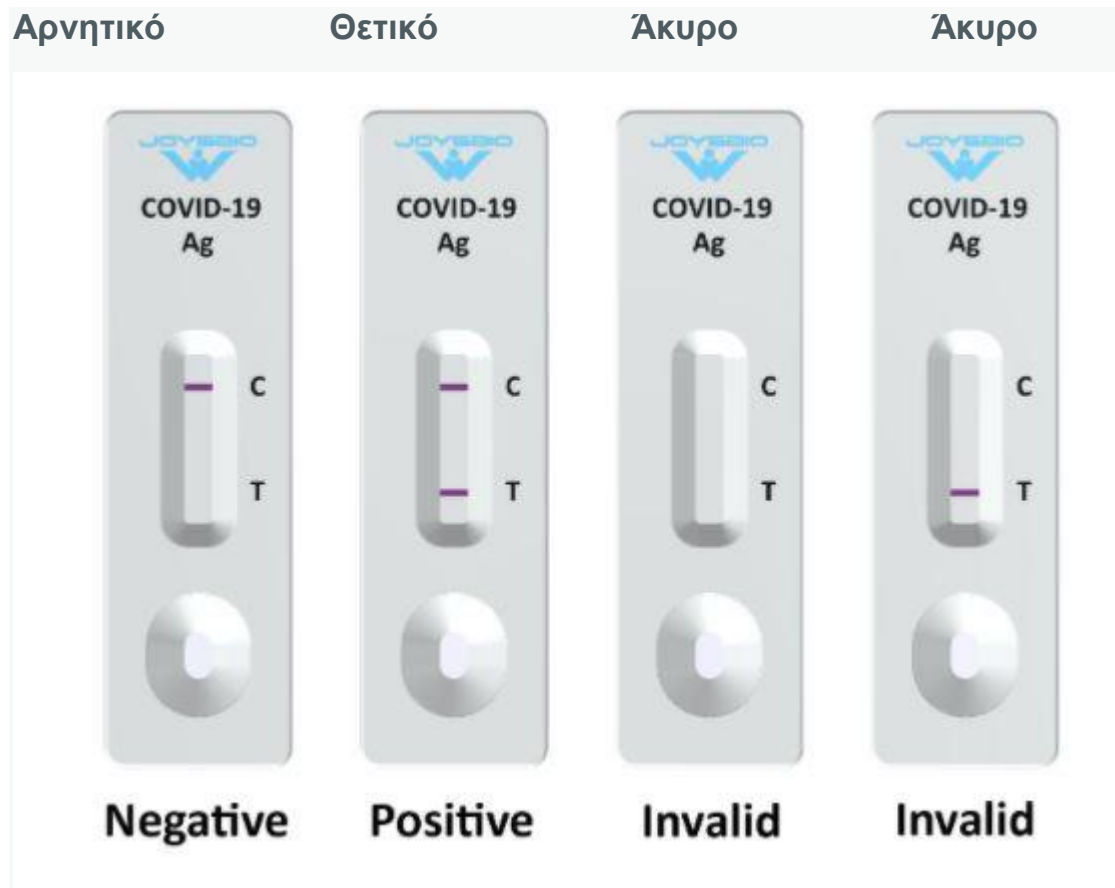

Τι γίνεται σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος

Το θετικό αποτέλεσμα από τα self-tests θα δηλώνεται από τον ίδιο τον πολίτη στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα selftesting.gov.gr που κατασκευάζει ήδη το υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ. Στόχος είναι, όταν φτάσουν τα τεστ στα φαρμακεία, να είναι έτοιμη και η ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία θα δηλώνονται τα θετικά αποτελέσματα.

Για την επιβεβαίωση της θετικότητας και τη χορήγηση ειδικής αναρρωτικής άδειας από την εργασία, θα απαιτείται επανέλεγχος σε δομή Υγείας. Ο επανέλεγχος σε ιδιωτική δομή θα είναι δωρεάν.